

DILUBAG™

- 3和5升的即用型袋装肉汤稀释剂



DILUTUBE™

- 无菌的即用型胶管



DILUMAT™



MASTERCLAVE®

- 全自动的培养基制备系统，可以分别用于制备9升、28升和60升的肉汤或琼脂培养基



SMASHER™

- 无论是400毫升的稀释总体积的样品，还是75g做1:4倍稀释的样品，都可以达到完美的均质效果
- 均质时间最短，噪音影响最小



SMASHER™ XL

- 大容量的均质器，可以同时用于2个2L或1个4L的稀释袋的均质
- 处理的样品量可以高达375g (1:10倍稀释)

VIDASUP™

- VIDAS® UP 提供了致病菌的明日方案
- 实验操作简单，手工操作时间短



tempo™

- 创新性的全自动指示菌计数系统
- 明日方案

不同的模块，为您组装成不同的Dilumat START和Dilumat EXPERT EVO，满足您的不同需求



梅里埃诊断产品(上海)有限公司
上海市浦东新区康桥工业区
浦三路4633号
邮编: 201315
电话: (021) 6097 8388
传真: (021) 6097 8399
www.biomerieux.com.cn

北京分公司
电话: (010) 8535 8388
传真: (010) 8535 8333
成都分公司
电话: (028) 8620 2052
传真: (028) 8620 2051

广州分公司
电话: (020) 8762 7010
传真: (020) 8762 7015
生物梅里埃中国有限公司
电话: (852) 2356 7033
传真: (852) 2330 2085



新一代全自动重量稀释仪



标准化的样品前处理过程 高效的实验室工作效率

经济实用
工作效率高

灵活可调整的
速率
安全性

溯源性
操作简单

● 提高样品前处理的速度

25g 1:10倍稀释, 10秒以内*

375g 1:4倍稀释, 20秒以内**

375g 1:10倍稀释, 1分钟以内**

* 高速模式 ** 双泵模式

● 完美的性能

- 全自动的旋转分装臂, 保证在稀释袋完全打开的状态下进行稀释, 避免了交叉污染
- 符合BAM和ISO 7218要求的高精度
- 双向LIMS 通信连接
- 完全溯源性
- 可定制的标签



● 满足您的各种需求

- 只需要一个Dilumat™, 便可以完成3g-375g样品的前处理工作
- 3种稀释速率, 适合用于所有类型的样品
- 可以同时连接6种不同的稀释剂 (2种连接到内嵌式蠕动泵+4种连接到外接蠕动泵e-pumps), 达到最大的灵活性
- 针对于大容量的样品 (375g) 升级到XL的配置
- 系统可以与Dilutube, Dilubag™和Masterclave®相兼容连接
- 站立式的控制面板可以节省工作台空间 (选配)



针对于大容量样品, 可以配XL套件升级为 Dilumat EXPERT EVO




站立式控制面板

● 简易的操作

- 巧妙的软件设计和可变色的LED灯可以显示出稀释的状态
- 即插即用! 无需繁琐的安装步骤
- 全自动启用的操作模式, 无需操作人员的手动干预
- 清洁方便的可移动式触屏控制面板
- 体型小巧, 可以自由分配工作空间
- 所有的表面都方便清洁



Dilumat™ START 和 Dilumat™ EXPERT EVO, 改变了您实验室的工作流程

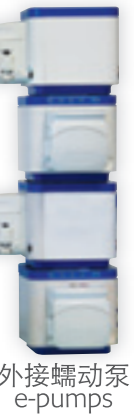

外接蠕动泵 e-pumps